



HPM[®]

MATRATZEN-MANAGEMENT FÜR KRANKENHÄUSER

Mit HPM®
das Bettenmanagement
optimieren

HPM® – die intelligente Digitalisierungslösung für die sichere und effiziente Zusammenarbeit zwischen Hygiene, Pflege, Medizintechnik, Reinigung/Aufbereitung und Controlling.

REAL TIME LOCATION SYSTEM
+ HYGIENISCHER STATUS
+ TECHNISCHER STATUS
VON MEDIZINPRODUKTEN

Matratzen-Management mit HPM® und Wulff Klinikmatratzen

Optimieren Sie das Matratzen-Management Ihrer Klinik und vereinfachen Sie die Bedarfsanalyse Ihres Einkaufs mit HPM® von CLINARIS und WULFF Klinikmatratzen. Patientenversorgung und Matratzennutzung stehen in unmittelbarem Zusammenhang und erfordern ein aktives Management. Mit unserer kooperativen Digitalisierungslösung organisieren Sie Ihr Matratzen-Management sicher, einfach und genau. HPM® und Wulff Klinikmatratzen ermöglichen die Berechnung des individuellen Verschleißes anhand sensibler Indikatoren wie Liegenächte und Nutzungsintensität. Hierdurch entfällt der automatische Austausch nach einer vordefinierten Zeitspanne, die Matratzen werden nach individuellem Bedarf ersetzt. Die Patientensicherheit wird erhöht, da kontaminierte Matratzen

und die damit verbundenen gesundheitlichen Risiken für Patienten frühzeitig erkannt und entsprechende Maßnahmen ergriffen werden. Patienten erhalten zu jeder Zeit eine vollfunktionsfähige Matratze, unnötige Neuanschaffungskosten werden reduziert. WULFF Klinikmatratzen versieht die Produkte mit langhaftenden Labels inklusive NFC, welche der einfachen Identifikation dienen. Für die zentrale Bettenaufbereitung oder Waschanlage kann zusätzlich ein RFID-Tag implementiert werden. Über NFC werden in HPM® die Einsatztage getrackt. Die umfangreiche Datenbasis ermöglicht die Ableitung verschiedener Handlungsschritte; beispielsweise die Prüfung des Matratzenkerns nach 30 Liegenächten auf Flüssigkeit / Schimmel oder die Messung des „Gesäßdurchhang“ nach 100 Liegenächten.



Transparenz

Volle Kontrolle. Mit HPM® erhalten Sie immer den Echtzeitstatus Ihrer Klinikbetten und Matratzen. Wulff informiert in einer tagesaktuellen Übersicht über den Bestand an Matratzen und Schutzbezügen




Dokumentation

Auf einen Blick. Hinterlegen Sie die Produktdokumentation digital und greifen Sie jederzeit darauf zu



Effizienz

Finden statt Suchen. Durch den Zugriff auf Echtzeit-Standortdaten werden Suchzeiten und Laufwege reduziert

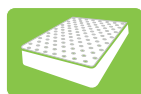

Nutzungsdauer und -intensität

Fest im Griff. Eine umfangreiche Datenbasis ermöglicht gezielte Maßnahmen zur Aufbereitung und Prüfung der Matratzen. Der Austausch erfolgt nach tatsächlicher Nutzungsdauer