



HPM<sup>®</sup>

MATRATZENMANAGEMENT FÜR KRANKENHÄUSER



## Mit HPM® das Matratzenmanagement optimieren

HPM® – die intelligente Digitalisierungslösung für die sichere und effiziente Zusammenarbeit zwischen Hygiene, Pflege, Medizintechnik, Reinigung/Aufbereitung und Controlling.

REAL TIME LOCATION SYSTEM  
+ HYGIENISCHER STATUS  
+ TECHNISCHER STATUS  
VON MEDIZINPRODUKTEN

### Matratzenmanagement mit HPM®


Optimieren Sie das Matratzenmanagement Ihrer Klinik und ermöglichen Sie eine faktenbasierte Ersatzbeschaffung mit HPM® von CLINARIS. Patientenkomfort und Matratzenverschleiß stehen in unmittelbarem Zusammenhang und erfordern ein aktives Management. Mit der digitalen Matratzenmanagement-Lösung HPM® haben Sie in Echtzeit einen Überblick über die tatsächliche Nutzungsdauer von Standard- und Spezialmatratzen. So können Sie Matratzen, welche die vom Hersteller empfohlene maximale Nutzungsdauer erreicht haben, gezielt austauschen. Somit ist sichergestellt, dass Patienten eine voll funktionsfähige Matratze erhalten und dass vorzeitige und damit unnötige Ersatzbeschaffungskosten reduziert werden.

Die Klinikmatratzen werden dabei mit speziellen Aufklebern mit eingespeisten NFC-Tags versehen, wodurch sie einfach identifiziert und prozessual erfasst werden können. Um Matratzen z.B. in einer zentralen Bettenaufbereitung oder Waschanlage automatisiert zu erfassen, kann zusätzlich ein RFID-Tag an den Matratzenbezug angebracht werden. Abgeleitet von der Erfassung der Einsatzdauer über NFC/RFID können Vorgaben für weitere Handlungsschritte im Rahmen der Aufbereitung gemacht werden, wie z.B. die Prüfung des Matratzenkerns nach 30 Einsatztagen auf Flüssigkeit bzw. Schimmel oder die Messung des „Gesäßdurchgangs“ nach 100 Einsatztagen.



#### Effizienz

Finden statt Suchen. Durch den Zugriff auf Echtzeitstandortdaten werden Suchzeiten und Laufwege reduziert.

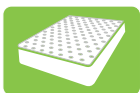

#### Nutzungsdauer und -intensität

Fest im Griff. Eine umfangreiche Datenbasis ermöglicht gezielte Maßnahmen zur Aufbereitung und Prüfung der Matratzen. Der Austausch erfolgt faktenbasiert nach tatsächlicher Nutzungsdauer.



#### Transparenz

Volle Kontrolle. Mit HPM® erhalten Sie immer den Status und die Nutzungsdauer Ihrer Klinikbetten und Matratzen in Echtzeit.



#### Dokumentation der Aufbereitung

Einfach und digital. Mit HPM® erhalten Sie eine detaillierte Dokumentation der einzelnen Aufbereitungsschritte.